

Zeitschrift: Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchungen und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit
Band: 90 (1999)
Heft: 2

Artikel: Quantitative GC-MS method for the determination of aniline, chloroaniline and toluidine released from inks of ballpoint and fiber-tip pens
Autor: Niederer, Markus / Schlegel, Urs / Hohl, Christopher
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-981783>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Quantitative GC-MS Method for the Determination of Aniline, Chloroaniline and Toluidine Released from Inks of Ballpoint and Fiber-tip Pens

Markus Niederer, Urs Schlegel, Christopher Hohl and André Herrmann,
Kantonales Laboratorium Basel-Stadt, Basel

Received 12 October 1998, accepted 8 February 1999

Introduction

In Switzerland legal restrictions limit the maximum release of aromatic amines from inks of pens designed for children (1). Recently, we presented a HPLC-method for the determination of such compounds (2). In this paper, we would like to show a further development of our former semi-quantitative gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method, which was used to confirm the results of HPLC-analysis. GC-MS now allows precise quantification of aniline, chloroaniline and toluidine in inks of ballpoint pens.

Method

Reagents and reference materials

Methanol p.a. (Merck 1.06009), Hydrochloric acid 25 % p.a. (Merck 1.00316), sodium hydroxide p.a. (Merck 1.06545), toluene p.a. (Merck 1.08325), trifluoroacetic acid anhydride puriss. (TFAA) (Fluka 91719), deuterated aniline-d₅ 99 % (Cambridge Isotope Laboratories DLM-862) CAS-Nr. 4165-61-1, aniline > 99.5 % (Merck 1.01261) CAS-Nr. 62-53-3, o-chloroaniline 98 % (Aldrich C2,239-3) CAS-Nr. 95-51-2, m-chloroaniline 99 % (Aldrich C2,240-7) CAS-Nr. 108-42-9, p-chloroaniline 98 % (Aldrich C2,241-5) CAS-Nr. 106-47-8, o-toluidine purum (Fluka 89610) CAS-Nr. 95-53-4, m-toluidine puriss. (Fluka 89620) CAS-Nr. 108-44-1, p-toluidine puriss. (Fluka 89630) CAS-Nr. 106-49-0.

Sample preparation

Extract samples with 0.07 M HCl as described in (2) and spike with aniline-d5 (final concentration for GC-MS injection 10 ng/ μ l). After conditioning with 10 ml methanol load a SPE cartridge (C8) with approx. 10 ml raw extract and rinse with 30 ml 0.07 M HCl. Adjust pH of the eluate to > 12 with 5 M NaOH. Shake with 2 x 7 ml of toluene and reject the lower water phase. Add 3 drops of TFAA in order to form amine perfluoroacyl derivatives and evaporate (40 °C) to minimal volume. Redissolve residue in a defined volume of toluene for subsequent GC-MS analysis.

Determination by GC-MS

Identification and determination of amine perfluoroacyl derivatives were performed by GC-MS (Carlo Erba HRGC 5160, Fisons and GCQ, Finnigan MAT) under the following conditions: DB-5MS (J&W) fused silica column (30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μ m film) with a retention gap (0.5 m x 0.32 mm I.D., deactivated) used with on column injection of 1.0 μ l; temperature programme 90 °C (1 min.)-(5 °C/min.)-140 °C-(30 °C/min.)-200 °C (5 min.); carrier gas (helium) 60 kPa; Ionization mode: EI (trap offset 10), sec per scan: 0.5, mass range 50–230 amu.

Calibration and quality control


Internal standard calibration was performed with a constant concentration of 10 ng/ μ l aniline-d5 (quantification mass 194 amu) in each calibration solution (0.5 ml toluene and 2 μ l TFAA). Aniline (quan. mass 189), o-chloroaniline (quan. mass 188), m-chloroaniline, p-chloroaniline (both quan. mass 223), o-toluidine, m-toluidine and p-toluidine (quan. mass 203) were used for calibration in amounts ranging from 0.2 ng to 10 ng (correlation coefficients $r > 0.998$). Corrections of quantitation were based on the internal aniline-d5 standard. Recovery rates of the standards were between 95 % and 110 %. Reproducibility of four ink sample replicates expressed as mean relative standard deviation of each compound was between 1 and 8 %. The calculated limits of detection ($s/n > 3$) were for all compounds 0.2 mg/kg dry weight of ink in the worst case.

Results and Discussion

Gas chromatography and mass spectra of amine derivatives

The applied GC-MS method allowed the separation of all aromatic amine perfluoroacyl derivatives of interest by retention time in calibration mixtures (fig. 1a) as well as in real ink samples (fig. 1b). With the specific mass traces it was also possible to distinguish between the coeluting deuterated (m/z 194) and unlabelled (m/z 189) anilines (not shown here). The use of deuterated aniline as an internal standard solved our former problems with fluctuations of sensitivity of the mass detector (ion trap) in real ink samples especially. Such effects can now be eliminated making precise quantification possible.

Chromatogram Plot C:\GCQ\DATA\MN\AMIN98\KUGEL304 11/09/98 15:29:29
 Comment: AMCAL2 5.0 ng 1ul OC
 Scan No: 1 Retention Time: 4:15 RIC: 9516 Mass Range: 50 - 92
 Plotted: 1 to 687 Range: 1 to 687 100% = 1271187

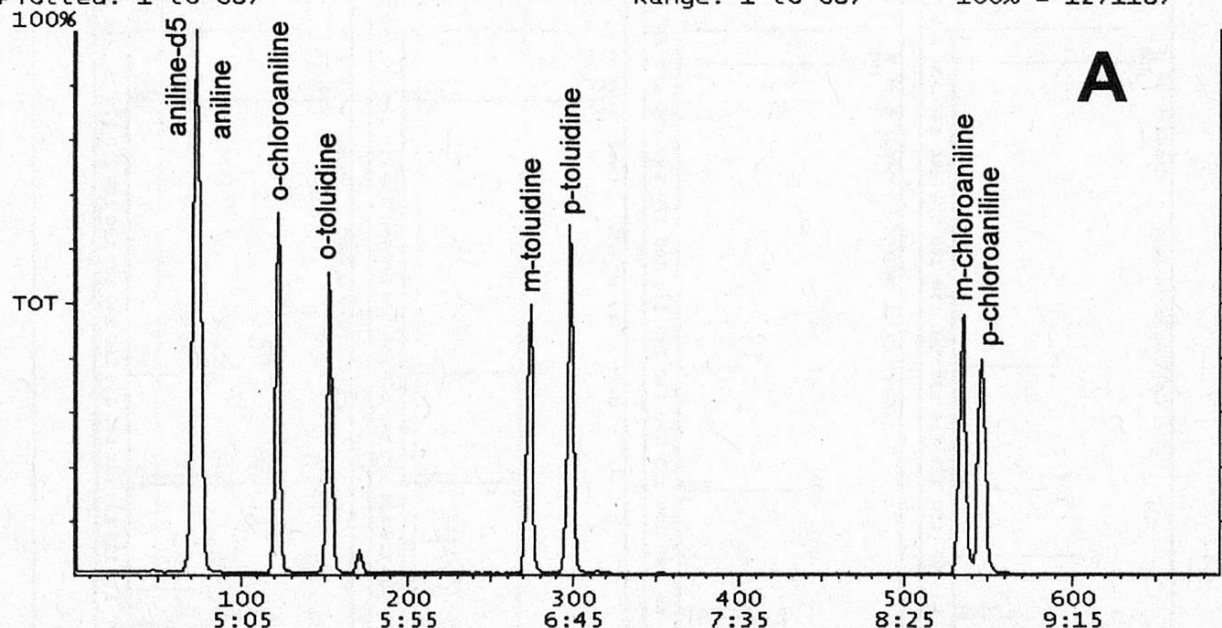

Chromatogram Plot C:\GCQ\DATA\MN\AMIN98\KUGEL310 11/10/98 10:43:18
 Comment: EX980632 1ul OC
 Scan No: 1 Retention Time: 4:15 RIC: 23891 Mass Range: 50 - 109
 Plotted: 1 to 687 Range: 1 to 687 100% = 3919000

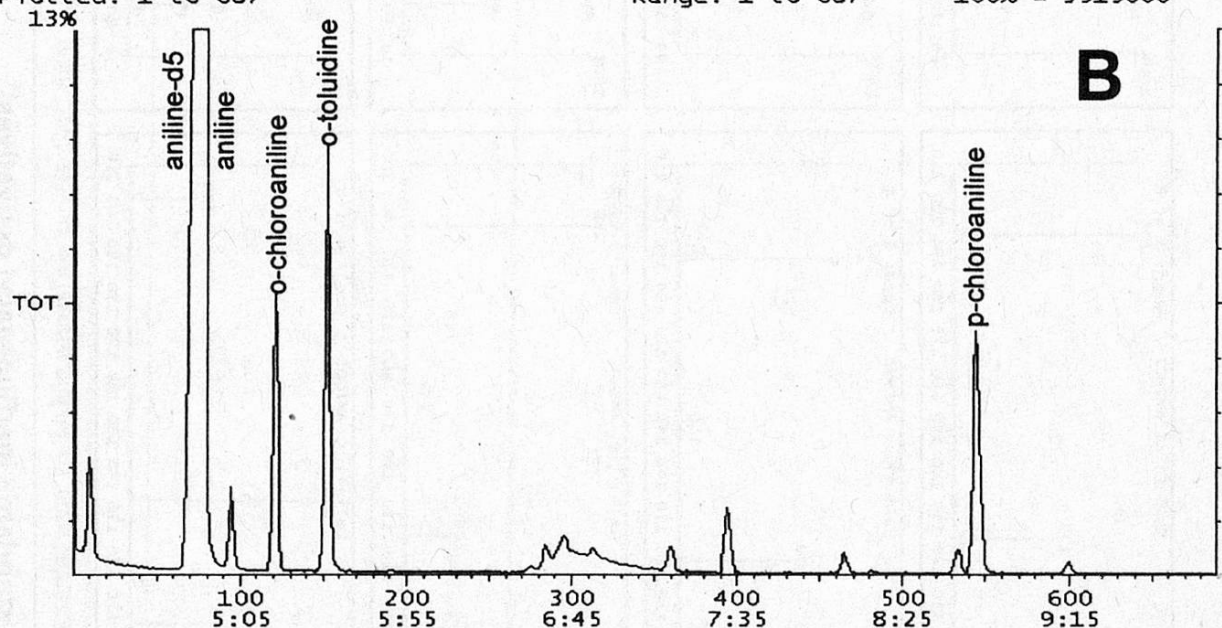


Figure 1 GC-MS run of amine (perfluoroacyl derivative) standard mixture (A) and ink sample (B)

Additionally, we were able to identify each compound according to their specific mass spectra (fig. 2). Eventhough spectra were similar a reliable differentiation between the m- and p-isomers of chloroaniline with differing carcinogenic potentials could be done: The perfluoroacyl derivative of the carcinogenic p-chloroaniline (3) shows an inverse signal ratio of m/z 126 and m/z 154 as well as lacking a signal of m/z 111 compared to the noncarcinogenic m-isomer.

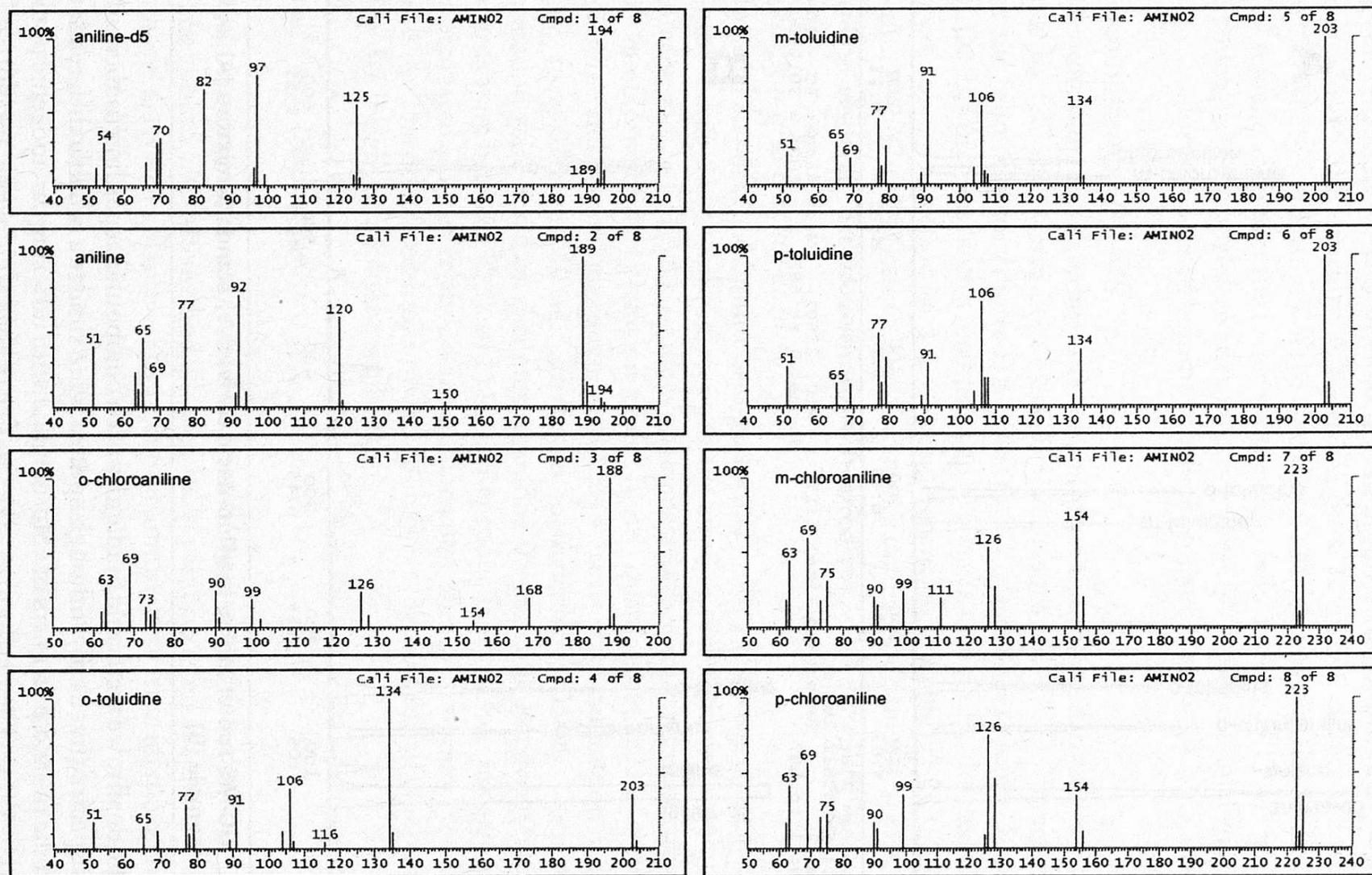


Figure 2 MS spectra of amine standards (perfluoroacyl derivatives)

Table 1
Comparison of amine determination in ink samples with GC-MS and HPLC

	<i>sample</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>correlation</i>
aniline mg/kg dwt	HPLC	74.5	31.1	567.8	275.6	100.5	64.1	819.9	127.2	99.4	715.0	0.9896
	GCMS	80.8	33.3	781.9	272.9	87.0	36.7	885.2	109.3	68.5	826.0	
	ratio %	109	107	138	99	87	57	108	86	69	115	
o-toluidine mg/kg dwt	HPLC	< 0.7	12.2	44.5	105.9	< 0.7	19.8	65.2	< 0.7	< 0.7	130.0	0.9871
	GCMS	< 0.2	9.9	38.7	116.3	< 0.2	9.9	45.3	< 0.2	< 0.2	130.0	
	ratio %		81	87	110		50	70			100	

ratio % = ratio of HPLC to GCMS in percent

dwt = dry weight

Comparison of amine determination with GC-MS and HPLC

Results obtained for aniline and toluidine in inks of ballpoint pens showed good agreement with our HPLC-method (table 1). Ratios (%) of HPLC to GC-MS determination were in an acceptable range with the exception of sample 6. The same was true for p-chloroaniline found in sample 3 and 7 (ratios 107–126 %, not shown in table 1). The two methods are highly correlated for both, aniline and toluidine ($r > 0.98$). Therefore, GC-MS is an excellent alternative method for the determination and confirmation of volatile aromatic amine derivatives in ink samples.

Summary

A GC-MS method concerning the identification and quantitative determination of free aniline, chloroanilines and toluidines in inks of ballpoint and fiber-tip pens is presented. Fluctuations of sensitivity of the mass detector are compensated by using deuterated aniline as an internal standard. O-, m- and p-isomers having different carcinogenic potentials can be discriminated by specific masses of their perfluoroacetyl derivatives. Results obtained for aniline and toluidine in ink samples show good agreement with our HPLC-method.

Zusammenfassung

Es wird eine GC-MS-Methode vorgestellt, mit der freies Anilin, Chloranilin und Toluidine in Kugelschreibertinten sowie in Filz- und Faserstiftflüssigkeiten identifiziert und quantitativ bestimmt werden können. Mit Hilfe von deuteriertem Anilin als internen Standard werden Empfindlichkeitsschwankungen des Massendetektors kompensiert. Aufgrund der spezifischen Massenspektren der Perfluoracylderivate ist es möglich o-, m- und p-Isomere, welche eine unterschiedliche Kanzerogenität aufweisen, zu unterscheiden. Die Resultate von Anilin und Toluidin in Tintenproben zeigen eine gute Übereinstimmung mit unserer HPLC-Methode.

Résumé

La méthode GC-MS présentée permet d'identifier et de déterminer l'aniline, les chloroanilines et toluidines libres présentes dans les encres de stylos à bille et de stylos-feutre. A l'aide d'un standard interne d'aniline marqué au deutérium on peut compenser les fluctuations de sensibilité du détecteur de masse. Les spectres de masse spécifiques des dérivés de perfluoracyl permettent de différencier les isomères o, m et p, qui ont un potentiel cancerigène différent. Les résultats obtenus avec l'aniline et la toluidine dans les échantillons d'encre montrent une bonne corrélation avec notre méthode de chromatographie en phase liquide.

Key words

Aromatic amines, GC-MS, Ink, Ballpoint pen, Fiber-tip pen

References

- 1 Verordnung über Gebrauchsgegenstände (GebrV) vom 1.3.1995 (SR 817.04.). Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, Bern 1995.
- 2 *Bürgi, Ch., Bollhalder, R. Hohl, Ch., Schlegel, U. und Herrmann, A.*: HPLC method for the determination of aromatic amines released from inks of ballpoint and fiber-tip pens under physiological conditions. *Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg.* **89**, 177–187 (1998).
- 3 Deutsche Forschungsgemeinschaft, MAK- und BAT-Werte-Liste 1998. Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 34 Wiley-VCH, Weinheim 1998.

Korrespondenzadresse: Dr. Markus Niederer, Kantonales Laboratorium
Basel-Stadt, Postfach, CH-4012 Basel